



ОТРЕЗНОЙ СТАНОК
QCUT 500 A

The Qcut 500 A is the powerhouse of the large cut-off machine family. Equipped with a highly dynamic axis drive and automatic travel cut/chop cut functions, the system cuts large components with exceptional precision, minimal contact, and outstanding speed.

- | Fast, powerful cuts: The highly dynamic axis drive allows rapid traverses of up to 80 mm/s and greatly reduces cutting time
- | Versatile applications: Cutting of particularly long samples is easily possible thanks to side openings on both sides
- | Multi-Position Process (MPP): Simultaneous positioning and automatic cutting of different components on the machine table



ОТРЕЗНОЙ СТАНОК QCUT 500 A
SUPERIORITY IN DETAIL

1. Ergonomic control panel

- | Large 12.1" industrial touchscreen with intuitive QATM software
- | Quick setup, control of all axes with joystick

2. Robust machine body

- | Sturdy powder-coated aluminum construction
- | Integrable recirculating cooling unit
- | Automatic central lubrication of the axes

3. Large machine table

- | Made of stainless steel with integrated longitudinal and cross T-slots
- | Secure clamping of complex workpiece shapes using the T-slot table or Easy clamping system

4. Large cutting chamber

- | Large sliding door provides easy access and visibility
- | Side swing door for convenient access to cutting chamber
- | Side openings on the right and left for long samples
- | Break-resistant LED interior lighting

5. Optimized swivel arm

- | Highly efficient cooling system
- | Increased cutting capacity thanks to parallel guided cut-off wheel guard
- | Laser alignment aid for easy workpiece positioning




ОТРЕЗНОЙ СТАНОК QCUT 500 A

ОСОБЕННОСТИ



STAINLESS STEEL MACHINE TABLE

- | Spacious machine table enables precise work even under heavy loads.
- | Integrated T-slots for the Easy clamping system for quick mounting of clamping tools
- | Efficient and reliable fixation of complex geometries using clamping devices
- | Load capacity up to 120 kg (including clamping devices)

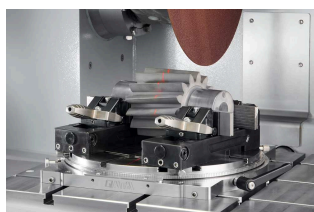


LASER ALIGNMENT

- | Optional laser alignment projects the cutting line directly onto the workpiece, enabling precise positioning and exact cut placement.
- | Easy positioning of workpieces
- | Precise clamping without much effort




ROBUST MACHINE WITH LARGE CUTTING CHAMBER

- | Robust, powder-coated aluminum machine body features a large sliding door with scratch-resistant laminated safety glass and convenient side access door.
- | Machine body with integrable recirculating cooling unit and automatic central lubrication
- | Large cutting chamber access with safety interlock —

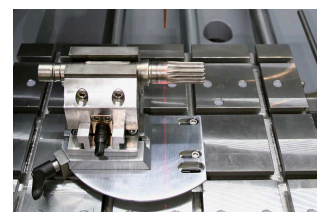

PRECISION CROSS FEED

- | The table-integrated Z-axis maintains consistent cutting height while the automatic cross feed with serial cutting function delivers precise parallel cuts.
- | Simple and intuitive serial cutting
- | The multi-position process (MPP) allows more complex serial cutting to be carried out

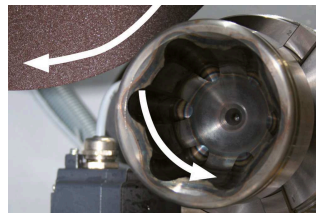

ROTATION TOOL


- | The optional rotation tool features a vertical rotary feed parallel to the wheel with software-controlled angle input.
- | More uniform cutting surfaces and cutting quality
- | Cutting time is halved for rotationally symmetrical parts
- | Protects against cut-off wheel run-out



INTUITIVE AND EASY OPERATION

Large 12.1" industrial touchscreen with intuitive QATM user software and joystick.

- | Easily manage process parameters and create customer-specific maintenance tasks (200 user programs can be saved)
- | Parameters such as feed rate, travel distance, and cutting force can be changed during automatic operation

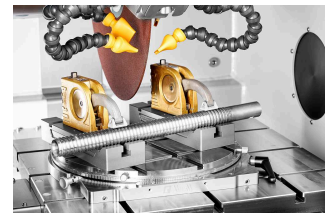

PULSED CUTTING

- | For thick and difficult-to-cut materials, the adjustable automatic pulsed cutting provides gentle sectioning with optimal cooling of the cut interface.
- | Enhanced cutting results for larger components
- | Superior cooling of contact surfaces



CUTTING FORCE DEPENDENT FEED CONTROL (X- AND Y-AXIS)

The feed rate automatically decreases when cutting force reaches a preset limit, protecting the machine, sample, and clamping tools from overloading.

ОТРЕЗНОЙ СТАНОК QCUT 500 A


АКСЕССУАРЫ



RECIRCULATION COOLING UNIT

Compact, integrable cooling system for standard applications.

- | Can be integrated into the housing and extended
- | Multi-chamber filtration
- | Inlet sieve with filter bag (see consumables)

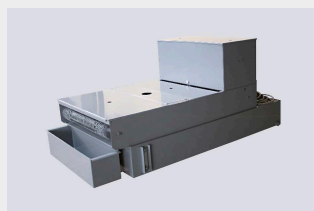

BELT FILTER SYSTEM

Large cooling and filter system for continuous operation, e.g. in serial applications.

- | Tank size: 285 l
- | Filtering capacity: 100 l/min (referring emulsion)
- | Pump capacity: 100 l/min



CENTRIFUGAL SEPARATOR

Work safety: Working environment with improved air quality.

- | Removes coolant mist
- | Purifies the air and increases visibility
- | Exhaust power 452 or 500 m³/h depending on voltage

PERFECT CUTTING - CUT-OFF WHEELS FROM QATM

Резка более надежна, безопасна и эффективна, если для ее обработки используются правильные ингредиенты: знания, забота и правильный выбор расходных материалов и инструментов. The Qprep range includes specially developed cut-off wheels for a wide variety of materials and requirements.


- | Low thermal influence on the specimen during the cutting process
- | Wet abrasive cutting achieves very fine surface finishes after cutting
- | Optimal cutting shortens the further preparation process



FAST, POWERFUL, FLEXIBLE - QTOOL CLAMPING DEVICES

Our innovative clamping devices are used to clamp workpieces securely and precisely to ensure exact cutting and grinding processes. There is a wide range of different clamping devices that have been developed for specific applications and workpiece sizes.

- | Suitable for regular and irregularly shaped samples
- | Fast, repeat-accurate clamping of regularly shaped samples
- | Large range of different clamping tools and systems available

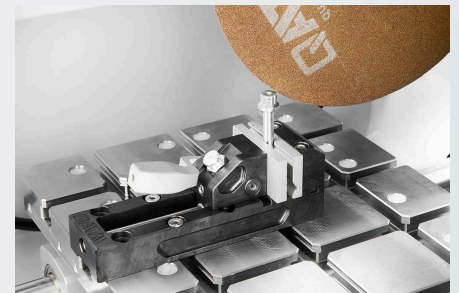

ОТРЕЗНОЙ СТАНОК QCUT 500 A

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСОБЕННОСТИ

Рабочий диск	до \varnothing 508 мм/20"
Макс. отрезная способность	\varnothing 190 мм
Скорость подачи	0.001 - 50 mm/sec
Размер фланца крепления диска	\varnothing 32/40 мм
Перемещение по оси X автоматическое	420 мм
Перемещение по оси Y автоматическое	280 мм
Перемещение по оси Z автоматическое (опция)	200 мм
Прецизионная ось Z	0,1 мм
Стол с перемещением по оси Z ШхГл	550 x 500 мм, нержавеющая сталь
Стол без перемещения по оси Z ШхГл	700 x 500 мм, нержавеющая сталь
T-образный паз	12 мм

Скорость	Регулируемая скорость вращения 1000-2800 /1000-2400 об/мин
Потребляемая мощность	30 кВА
Мощность привода (основной привод)	15 кВт, S1 режим работы
Габариты ШxВxГл	1300 x 1820 x 1250 мм
Вес	~ 1000 кг в зависимости от комплектации прибора

www.qatm.com/qcut-500-a

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАШИНА (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

M1832000  Qcut 500 A (Brillant 275) Базовый блок

БЛОК ПИТАНИЯ (НЕОБХОДИМ - 1 ШТ.)

A1832000 Qcut 500 A подключение питания 400В/50Гц (3Ph/N/PE)

A1832002 Qcut 500 A подключение питания 480В/60Гц (3Ph/PE)

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ДИСКА (НЕОБХОДИМ - 1 ШТ.)

A1832001 Qcut 500 A защитный кожух отрезного диска 432мм 17"

A1832010 Qcut 500 A защитный кожух отрезного диска 508мм 20"

ПОПЕРЕЧНАЯ ПОДАЧА (НЕОБХОДИМА - 1 ШТ.)

A1832008 Qcut 500 A Перемещение рабочего стола по оси X


A1832011 Qcut 500 A Перемещение рабочего стола по оси X/Z

РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА (НЕОБХОДИМА - 1 ШТ.)

A1832005  Qcut 500 A Рециркуляционная система охлаждения 400В/50Гц (3Ph/PE)

A1832006  Qcut 500 A Рециркуляционная система охлаждения 480В/60Гц (3Ph/PE)


A6501000  Ленточная система охлаждения и фильтрования 285 400В/50Гц (3ф/заземление)

A6501002  Ленточная система охлаждения и фильтрования 285 480В/60Гц (3ф/заземление)

Z6501000 Комплект подключения ленточной системы фильтрования 285

ОПЦИИ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ С МАШИНОЙ)

A1832004 Qcut 500 A Лазерный нивелир

A1832007  Qcut 500 A centrifugal separator 400V 50Hz (3Ph/PE)

A1832009  Qcut 500 A centrifugal separator 480V 60Hz (3Ph/PE)

PRECISION CLAMPING DEVICES, CLAMPING_DEVICES, PRECISION_CLAMPING_DEVICES

Z1870063 Reduction ring Ø 30 mm, Clamping_devices, Precision_clamping_devices

Z1870069 Manual chuck Ø 44 mm, Clamping_devices, Precision_clamping_devices

QUICK CLAMPING TOOLS, CLAMPING_DEVICES

QTOOL 80, CLAMPING_DEVICES, QTOOL_SERIES

Z2231203 Qtool 80 - 100mm, Clamping_devices, Qtool_series

Z2231204 Qtool 80 - 150mm, Clamping_devices, Qtool_series

02231243 Clamping jaw 40 mm, Clamping_devices, Qtool_series

Z2231215 Clamping jaws 70 mm, Clamping_devices, Qtool_series

02231245 Clamping jaw 40 mm bevelled, Clamping_devices, Qtool_series

02231246 Clamping jaw 40 mm cross prism, Clamping_devices, Qtool_series

Z2231216 Clamping jaws 70 mm slotted, Clamping_devices, Qtool_series

Z2231217 Clamping jaws 70 mm slotted prism, Clamping_devices, Qtool_series

QTOOL 80 VARIO, CLAMPING_DEVICES, QTOOL_SERIES

Z2231200 Qtool 80 Vario - 100 mm, Clamping_devices, Qtool_series

Z2231201 Qtool 80 Vario - 150 mm, Clamping_devices, Qtool_series

Z2231202 Qtool 80 Vario - 250 mm, Clamping_devices, Qtool_series

Z2231210 Workpiece stop, Clamping_devices, Qtool_series

02231200 Clamping jaw, 40 mm - for Qtool 80 Vario, Clamping_devices, Qtool_series

Z2231211 Clamping jaws, 70 mm, Clamping_devices, Qtool_series

02231213 Prism jaw, 40 mm, Clamping_devices, Qtool_series

02231229 Bevelled jaw, 40 mm, Clamping_devices, Qtool_series

02231230 Cross prism jaw, 40 mm, Clamping_devices, Qtool_series

Z2231212	Round bar jaws, 70 mm slotted, Clamping_devices, Qtool_series
Z2231213	Prism jaws, 70 mm slotted, Clamping_devices, Qtool_series
Z2231214	Clamping jaws, 70 mm slotted, Clamping_devices, Qtool_series

POWER CLAMPING SYSTEMS, CLAMPING_DEVICES, POWER_CLAMPING_SYSTEMS

POWER CLAMPING SYSTEM 100-540, CLAMPING_DEVICES, POWER_CLAMPING_SYSTEMS

Z2234016	Power clamping system 100-540, Clamping_devices, Power_clamping_systems
Z2234018	Prism clamping jaw, Clamping_devices, Power_clamping_systems
Z2234017	Clamping jaw flat, Clamping_devices, Power_clamping_systems
Z2234019	Angular drive, Clamping_devices, Power_clamping_systems

POWER CLAMPING SYSTEM LC 90, CLAMPING_DEVICES, POWER_CLAMPING_SYSTEMS

Z2234001	Power clamping system LC 90, Clamping_devices, Power_clamping_systems
Z2234003	Carrier jaws LC 90, Clamping_devices, Power_clamping_systems
Z2234004	V-groove jaw 100, Clamping_devices, Power_clamping_systems
Z2234005	Clamping jaw flat, Clamping_devices, Power_clamping_systems
Z2234009	Quick-change adapter, Clamping_devices, Power_clamping_systems
Z2234008	Step jaw 100, Clamping_devices, Power_clamping_systems
Z2234002	Clamping system X-Clamp 100, Clamping_devices, Power_clamping_systems
Z2234006	Socket 90°, Clamping_devices, Power_clamping_systems

БЫСТРО-ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ, CLAMPING_DEVICES, EASY_CLAMPING_PLATES

CLAMPING ACCESSORIES FOR ROTATING, SWIVELING AND SPECIAL APPLICATIONS, CLAMPING_DEVICES, CLAMPING_ACCESSORIES_SPECIALS

Z1304636	Expansion clamping device, Clamping_devices, Clamping_accessories_specials
Z1340000	Поперечные тиски 80/100, Clamping_devices, Clamping_accessories_specials



Z1340001 Поперечные тиски 80/150, Clamping_devices, Clamping_accessories_specials

УГЛОВЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ ТИСКИ, CLAMPING_DEVICES, CLAMPING_ACCESSORIES_SPECIALS

Z1304001 Угловые тиски 60, Clamping_devices, Clamping_accessories_specials

01304008 Щека V-образная для угловых тисков 60, Clamping_devices, Clamping_accessories_specials

Z1302000 Угловые тиски 80, Clamping_devices, Clamping_accessories_specials

01302016 Щека V-образная для угловых тисков 80, Clamping_devices, Clamping_accessories_specials

ROTATIG DEVICES, CLAMPING_DEVICES, ROTATION_DEVICES

Z1870059 Rotation device type RD1, Clamping_devices, Rotation_devices

Z1891001 Rotation device type RD2.1, Clamping_devices, Rotation_devices

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИСКИ И АКССУАРЫ, CLAMPING_DEVICES, UNIVERSAL_VICES_AND_ACCESSORIES


Z1350025 Clamping rail, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories


01350022 Prism 120°, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories


01350023 Prism slim, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories

01350024 Prism 90°, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories

01350025 Prism 90° high, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories

Z1350002  Универсальный зажим Mono 61, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories

Z1350004  Комплект Mono 61 в чемоданчике, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories

Z1350011  Зажим универсальный Mono 132, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories

Z1350005 Универсальные тиски Duo, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories

Z1350006 Универсальный цепной зажим, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories

92005796 Пятка V-образная продольная, для Mono/Piccolo, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories

92005797	Пятка V-образная поперечная, для Mono/Piccolo, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
92005799	Пятка продольная, для Mono/Piccolo, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
92005800	Пятка поперечная, для Mono/Piccolo, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
92005798	Пятка стандартная, для Mono/Piccolo, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
Z1350007	Адаптер высоты Piccolo, 60мм, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
Z1350003	Адаптер высоты Mono, 74мм, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
95003172	Удлинитель рычага для Piccolo 54 и Mono 61, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
Z1304591	Фиксирующий болт M6 x 25 мм для универсальных зажимов, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
95003169	Fixing screw Piccolo M8 x 25, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
95003170	Fixing screw Piccolo M10 x 25, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
95003168	Fixing screw Mono M10 x 32, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
91001157	T-гайка, M6 x 8, нержавеющая сталь, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
91001161	T-гайка, M8 x 10, нержавеющая сталь, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
91001159	T-гайка, M8 x 12, нержавеющая сталь, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories
91001158	T-гайка, M10 x 12, нержавеющая сталь, Clamping_devices, Universal_vices_and_accessories